




WELL Communications



Vico Hospital

by Haelvoet

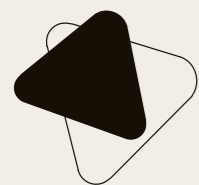

Haelvoet NV
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
INFO@HAELVOET.BE WWW.HAELVOET.BE

HOSPITAL - NURSING HOME FURNITURE EQUIPEMENT HOSPITALIER - MAISON DE REPOS ZIEKENHUIS- EN RUSTHUISUITRUSTING

duurzaamheid
stabiliteit
veiligheid

Het Vico ziekenhuisbed combineert een beproefde technologie met een moderne vormgeving. Deze techniek garandeert een lange levensduur en een maximum aan stabiliteit en veiligheid. Dat maakt de Vico Hospital tot een uiterst duurzame investering.



Haelvoet nv
Uitgave 2010
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Vico

techniek die presteert



001	Ligvlak • Comfortabel liggen
	Naar keuze worden er 2 verschillende ligvlakken aangeboden. Standaard bestaat het ligvlak uit afgeronde stalen profielen. De optionele volkunststof ligvlakdelen zijn geschikt voor radiologisch onderzoek van de thorax. Een optionele cassettehouder op de rugsteun zorgt ervoor dat men de patiënt niet hoeft te verplaatsen.
002	Matrashouders • Doelgericht aanwezig
	De matrashouders belemmeren een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze doen eveneens dienst als handvat om de rug en kniesteen manueel te verstellen.
003	Bedpanelen • Een harmonieus geheel
	Hoofd- en voetpaneel zijn bij alle types (Vela, Lauro en Jaro) zonder gereedschap eenvoudig uitneembaar. De vergrendelbare bedpanelen zijn standaard voorzien van stootwielen die zowel de wand als het bed beschermen tijdens het verplaatsen.
004	Hulzen • Optimale verzorging
	Twee hulzen aan het hoofdeinde voor de serumhouder, bedgalg of andere accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal kan uitgerust worden.
005	Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs
	De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed. De telescopisch verlengbare Trix onrusthekkens vormen een ultieme patiëntbescherming over de ganse bedlengte.
006	Bedieningshendel • Centraal en binnen handbereik
	De bedieningshendel activeert een gasveer om het gewenste ligvlakdeel te kunnen verstellen.
007	Afdekkap (*) • Hygiënisch
	De verwijderbare afgeronde kunststof afdekkap vereenvoudigt het reinigen van de onderwagen.
008	Hoog/laag systeem • Uiterst stabiel
	De hoog/laag draagarmen garanderen een uiterst stabiel bed op alle hoogtes. De grote verstelmogelijkheid van 41 cm tot 80 cm (bij wielen Ø 125 mm) vereenvoudigt het uit bed stappen en vergemakkelijkt de verzorging.
009	Hoog/laag voetpedaal • Eenvoudig te bedienen
	De hoog/laag verstelling gebeurt via een hydraulische pomp instelbaar d.m.v. een voetpedaal.
010	Wielen • Grote wendbaarheid
	Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel en wendbaar bed.
011	Centrale rem (*) • Activatie in één beweging
	Centraal geremde wielen met een goed bereikbare pedaal vergemakkelijken het gebruik van het Vico bed voor het verzorgend personeel.
012	Bedieningspedaal (*) • (anti-) Trendelenburgbediening
	Door de bedieningspedaal in te drukken wordt een zacht vloeiende bedinclinatie gecreëerd tot de gewenste (anti-) Trendelenburgpositie wordt bereikt.


* optie bij Vico Hospital

Comfort voor ieder

Comfort en welzijn zijn van het grootste belang bij het genezingsproces van de patiënt. Het Vico ziekenhuisbed creëert een optimale balans tussen ergonomie, duurzaamheid en veiligheid.


• Bedieningen

De bedieningshendel voor de rug- en knieverstelling is gebruiksvriendelijk en eenvoudig bedienbaar. De hoog/laag voetpedaal is gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.

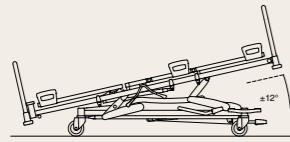


(anti-) Trendelenburgpositie

De (anti-) Trendelenburgpositie (*) kan uitgevoerd worden via het rode voetpedaal aan het voeteneinde van het bed. Ingedrukt inclineert het bed in een zacht vloeiende beweging tot de gewenste positie.

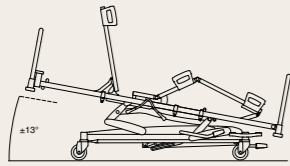

Zit- of relaxpositie

Het drie- of vierdelig (*) ligvlak biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over een eenvoudig te bereiken bediening aan beide zijden van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig ligvlak een relaxpositie (*) - verkregen worden.

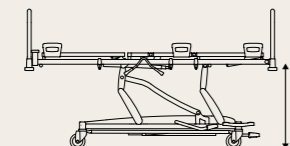

Hoog/laag positie

Met de hoog/laag pompbediening kan men handenvrij de gewenste bedhoogte aan beide zijden van het bed instellen. De hoogste positie van het bed bedraagt 80 cm (wielen \varnothing 125 mm). Onderzoek en behandeling van de patiënt kunnen hierdoor uitgevoerd worden zonder belasting van de rug.



• Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de patiënt. Bij het omhoog inclineren van de rugsteun verschuift deze automatisch naar achter. Hierdoor ontstaat een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.



Gebruiksvriendelijk

Bij het ontwerp van het Vico ziekenhuisbed werd ruime aandacht besteed aan de efficiëntie in de zorg. Dankzij doordacht materiaalgebruik, gladde en goed bereikbare oppervlakken is dit bed snel gebruiksklaar.

• Ligvlak Gemakkelijke reiniging

De standaard afgeronde stalen ligvlakprofielen bieden de mogelijkheid om het ligvlak uiterst efficiënt te reinigen. Het Vico bed is optioneel verkrijgbaar met uitneembare volkunststof panelen. Deze ligvlakdelen zijn door hun uitgeknipte vormgeving en hun vlote uitneembaarheid uiterst snel te reinigen.



• Mechanisch Minimaal in onderhoud

De onderhoudsvrije hydraulische pomp en gasveren maken dit bed tot een duurzame investering.

• Verwijderbare afdekkap Hygiënisch

Dankzij de afgeronde kunststof afdekkap (*) zijn de moeilijk bereikbare oppervlakken gemakkelijk te reinigen en krijgt vuilophoping geen kans.



001 De bedieningshendel.

002 Het hoog/laag voetpedaal bevindt zich aan beide zijden van het bed, en is vlot bereikbaar voor het verplegend personeel.

003 Het (anti-) Trendelenburgpedaal (*).

004 De volkunststof ligvlakdelen (*) zijn geschikt voor radiologisch onderzoek zodat men de patiënt niet hoeft te verplaatsen.

005 De verwijderbare afdekkap (*) zorgt voor een gemakkelijke reiniging.


* optie bij Vico Hospital

Mobiel en flexibel


Het dagelijks gebruik wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk verplaatsbaar en wendbaar bed.

Centrale rem

Aan beide zijden van het voeteneinde is het Vico bed voorzien van een design rempedaal (*). De pedaal bedient simultaan de 4 wielen en kan in 3 standen geplaatst worden. Door op de rode pedaal te drukken activeert men de rem, terwijl de groene pedaal de remfunctie uitschakelt.

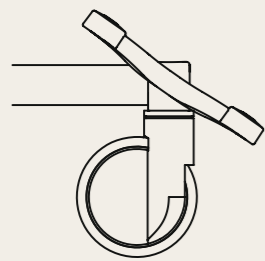


4 wielen geremd

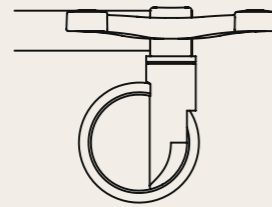

4 wielen vrijstaand

Deze positie laat toe het bed in alle richtingen te bewegen.

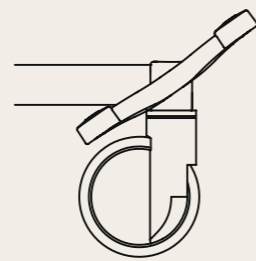


1 gefixeerd richtingswiel

Dit vergemakkelijkt het besturen van het bed bij een rechtlijnig traject.

Geïntegreerde bedverlenging

Een ziekenhuisbed moet aan ieders wensen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de patiënt. De geïntegreerde bedverlenging laat standaard toe om het bed tot 20 cm te verlengen.

Samen met de optionele voetverlenging (*) wordt een volledige functionaliteit van het ligvlak gegarandeerd.

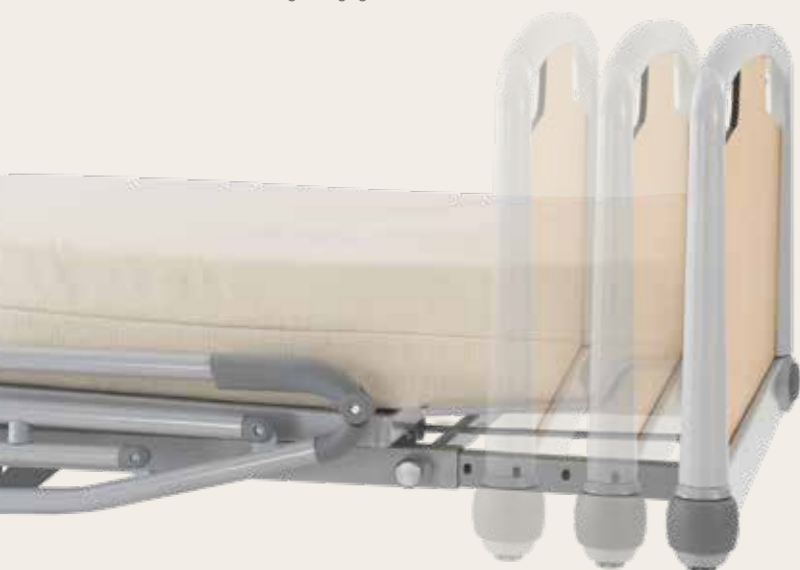


006




007

Veiligheid troef

Onze verschillende onrusthekkens bieden de patiënt een optimale veiligheid in elke bedpositie. Elk type onrusthekken heeft zijn specifieke voordelen naar gebruiker en patiënt toe. We laten u graag de vrije keuze.

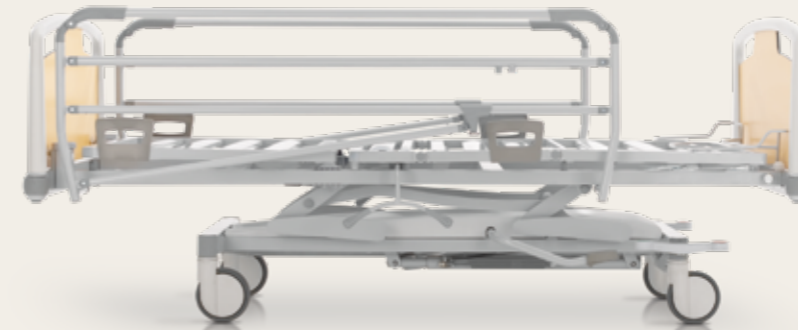

De Atmosphère onrusthekkens (*) bestaan uit één geheel en zijn neerklapbaar door een eenvoudig vergrendelsysteem.

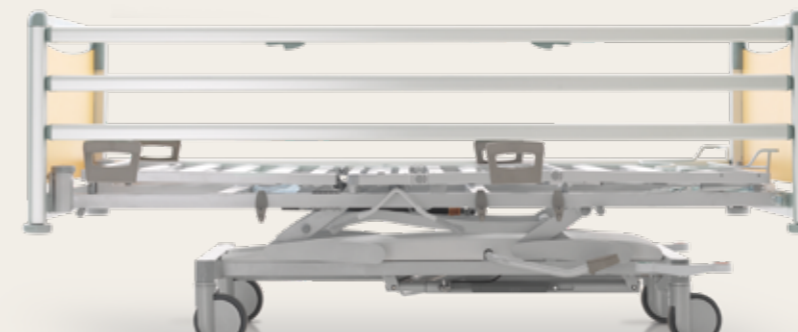

De Trix onrusthekkens (*) bieden met hun 3 latten veiligheid over de volledige lengte van het bed. De centrale tweehandbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van de onrusthekkens verhindert. Een geïntegreerd telescopisch systeem zorgt ervoor dat het Trix onrusthekken, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volle lengte afsluit.

006 De design rempedalen (*) zijn gemakkelijk te bereiken aan beide zijden van het voeteneinde.

007 Het Trix onrusthekken (*) beschermt de patiënt over de volledige bedlengte, dankzij het unieke telescopische systeem.

008 Bij gebruik van dikkere anti-decubitus matrassen kunnen we d.m.v. een optionele 4de lat (*) 13 cm extra bescherming bieden. Deze bescherming is volledig geïntegreerd in het Trix onrusthekken.



008

* optie bij Vico Hospital

Fraaie vormgeving

Onze bedopbouw maakt het mogelijk om te kiezen uit 3 types hoofd- en voetpanelen nl. Vela, Lauro en Jaro. Elk paneel wordt gekenmerkt door zijn specifieke lijnvoering en oog voor detail. Alle paneeltypes zijn vlot uitneembaar. Dankzij de ruime kleurkeuze uit onze standaardcollectie wordt de mogelijkheid geboden om dit bed volledig te integreren in het interieur van uw zorginstelling. Op verzoek zijn speciale kleuren en patronen mogelijk.



009 Op elkaar afgestemde kleuren, huiselijke materialen en een functioneel design vormen een geheel dat het welzijn van de patiënt bevordert.

• Bedpanelen



Type 1: Het standaard bedpaneel **Vela** bestaat uit een metalen beugel, voorzien van een volkunststof inzetpaneel. Het Vela paneel op het Vico bed is standaard voorzien van een paneelvergrendeling. De beugel is optioneel verkrijgbaar in verchroomde uitvoering.



Type 2: Het bedpaneel **Lauro (*)** bestaat uit een kunststof frame met een volkunststof inzetpaneel. Het Lauro paneel is standaard voorzien van een paneelvergrendeling.



Type 3: Het bedpaneel **Jaro (*)** bestaat uit een aluminium frame met een volkunststof paneel en wordt enkel aangeboden in combinatie met het Trix onrusthekken. Dit paneel is eveneens standaard voorzien van een paneelvergrendeling.

• Afwerking

Een wijde waaier aan uni-kleuren en houtstructuren helpt u om het Vico bed perfect te integreren in uw zorginstelling. De laminaatcollectie van Haelvoet heeft een hoge stootvastheid en is kras-, licht- en vochtbestendig. Alle laminaten zijn vervaardigd volgens de normen DIN 53419 en EN 438.




Zowel de bedpanelen als de nachttafels kunnen in deze kleurencollectie uitgevoerd worden.

Indien gewenst zijn oplossingen mogelijk passend bij de totale inrichting van uw zorgomgeving.

* optie bij Vico Hospital

Vico Hospital Samenvatting

Afmetingen en prestaties (bij standaard bed)

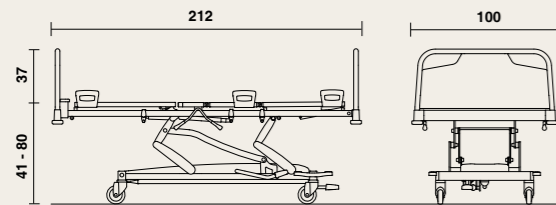

- breedte: 100 cm, lengte: 212 cm;
- hoogtevariatie ligvlak:
± 41 cm - ± 80 cm (bij wielen Ø 125 mm);
- vrije ruimte onderwagen: 100 à 150 mm (i.f.v. hoogte-instelling ligvlak);
- veilig werkgewicht: 180 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm.



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Het Vico ziekenhuisbed wordt vervaardigd volgens SO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN 60601-2-38 Medische elektrische toestellen - Deel 2: Bijzondere veiligheidseisen voor elektrisch verstelbare ziekenhuisbedden, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Vico		Opties Vico			
LIGVLAK	 • 3-delig stalen ligvlak	 • Telescopische bedverlenging tot 20 cm	 • 4-delig stalen ligvlak	 • 3-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	 • 4-delig ligvlak met uitneembare volkunststofplaten	 • Voetverlenging tot 20 cm
WIELEN	 • Levina wielen Ø 125 mm, individueel geremd		 • Cover design wielen Ø 125 mm, centraal geremd	 • Cover design wielen Ø 150 mm, centraal geremd	 • Integral wielen Ø 150 mm, centraal geremd	
PANEELTYPE	 • Vela paneel		 • Lauro paneel	 • Jaro paneel (enkel met Trix onrusthekken)		
ONRUSTHEKKENS			 • Atmosphère onrusthekken	 • Trix onrusthekken (enkel met Jaro-paneel)	 • Trix onrusthekken met 4de lat (enkel met Jaro-paneel)	
BEDIENING	 • Bedieningshendel	 • Hoog/laag voetpedaal	 • (anti-) Trendelenburgpedaal			
EXTRAS	 • 6 kunststof accessoirehaakjes		 • 2 hulzen aan voeteneinde			

Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze ziekenhuisbedden, zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

<p>001 Bedgalg</p>  <p>De bedgalg bestaat uit een geplooidedikwandige stalen buis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met manueel aanpasbaar ophanglint. Optioneel kan gekozen worden voor een lint met automatisch oprolsysteem.</p>	<p>005 Naamkaarthouder</p>  <p>De naamkaarthouder kan op het bedpaneel geplaatst worden. Op deze eenvoudige wijze kan het bed voorzien worden van een eenduidige identificatie.</p>
<p>002 Serumhouder voor bedgalg</p>  <p>De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.</p>	<p>006 Hellingsindicator</p>  <p>De hellingsindicator geeft de hellingshoek weer van het ligvlakdeel waarop dit voorzien wordt. Deze wordt per paar aangeboden en kan voorzien worden op rug-, knie- of ligvlakframe.</p>
<p>003 Tractiebeugel</p>  <p>De tractiebeugel wordt in de twee hulzen aan het hoofdeinde of in de paneelhulzen aan het voeteneinde geplaatst. De geplooidedikwandige stalen buis is afgewerkt met een chroomlaag.</p>	<p>007 Bokaalhouder</p>  <p>De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokaal. De houder wordt geplaatst in twee accessoirehaken die standaard voorzien zijn op het Vico bed.</p>
<p>004 Accessoirebeugel</p>  <p>De extra accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klant-specifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 340 mm lang en wordt geplaatst in twee accessoirehaken die standaard voorzien zijn op het Vico bed.</p>	<p>008 Serumhouder</p>  <p>De serumhouder bestaat uit een vast gedeelte en een verstelbaar gedeelte. Het verstelbaar gedeelte is voorzien van vier serumhaken. De vergrendeling gebeurt d.m.v. een spanknop. De serumhouder kan eveneens verkregen worden in een niet-verstelbare versie met 2 serumhaken.</p>

<p>009 Urinefleshouder</p>  <p>De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die standaard aanwezig zijn op het Vico bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.</p>	<p>013 Bedpanhouder</p>  <p>De bedpanhouder wordt eenvoudig opgehangen aan het bedpaneel.</p>
<p>010 Monitorhouder</p>  <p>De monitorhouder bestaat uit een stalen frame met een volkunststof blad. Afmetingen blad: 650 x 300 mm</p>	<p>014 Zuurstoffleshouder</p>  <p>De zuurstoffleshouder bestaat uit een stevige arm met een mand uit massieve staaldraad. Het geheel is afgewerkt met een chroomlaag. De zuurstoffleshouder kan in één van de 2 hulzen aan het hoofdeinde van het bed gemonteerd worden.</p>
<p>011 Documenthouder</p>  <p>De kunststof documenthouder is voorzien van een papierclip. De documenthouder kan aan het bedpaneel opgehangen worden. Volgende formaten zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4 staand (zie foto) of liggend • A3 liggend 	<p>015 Schrijftafel</p>  <p>De schrijftafel wordt opgehangen aan het bedpaneel. Het volkunststof blad, voorzien van een handgreep, kan in drie verschillende standen geplaatst worden.</p>
<p>012 Muurafstandhouder</p>  <p>Een rubberen wiel zorgt voor een veilige afstand tussen bed en muur tijdens de hoogteverstelling van het bed.</p>	<p>016 Opstahulp</p>  <p>De opstahulp biedt de patiënt een optimale steun bij het uit- en instappen. De opstahulp wordt geplaatst in de standaard huls op het vast ligvlakdeel van het bed. De ergonomische vormgeving maakt een vrije uit- en instapbeweging mogelijk.</p>